

BIOS living

ROLLATOR
56045



Instruction
Manual

BIOS living

The BIOS Living rollator comes with removable nylon storage bags, locking brakes, and a padded seat with back rest. It folds away easily for storage and transport and comes with anti-fold safety locks to prevent the rollator from accidentally folding, while in use.

Please read these instructions before assembly or use of this rollator, and please keep the manual in a safe place.

DO NOT assemble or use this equipment without first reading and understanding this instruction manual.

Personal Safety

- The rollator can provide assistance to an individual weighing up to 136 kg (300 lbs), including the weight of the contents of the nylon storage bags
- The maximum load of the nylon basket under seat is 10 kg (22 lbs)
- Never stand on the rollator, or use it as a step
- Never transport a person on the seat of the rollator
- Use caution when lifting and carrying the rollator
- Test the brakes before using. Care should be taken to ensure that ALL hand and height adjustments are secured, and that moving parts are in good working order before using this or any mobility aid
- Ensure that brakes are in the locked position before sitting
- Never sit on the rollator when it is on an incline
- Always sit in the center of the seat
- Never sit on the rollator when it is folded
- Each individual should always consult with their physician or

therapist to determine proper adjustment usage


- Avoid excessive weight in the rollator bag, it may cause rollator to tip
- Max weight load for rollator bag: 0.91 kg (2 lbs)
- Customers should seek the advice / recommendations of a medical professional, to determine if the rollator is suitable for their needs.

Assembly Instructions



Please examine the rollator for shipping damage. Do not use the rollator if there is apparent damage. Please contact your place of purchase for repair and/or return information.

1. Before assembling read all instructions thoroughly and make sure all the parts listed below are included.


- A. Right Handle
- B. Left Handle
- C. Backrest
- D. Front Wheels (2)
- E. Rollator Frame
- F. Rear Wheels (2)
- G. Fastening Knobs (2)
- H. Safety Buckles (2)
- I. Nylon Basket
- J. Rollator Bag
- K. Stability Knob (2)

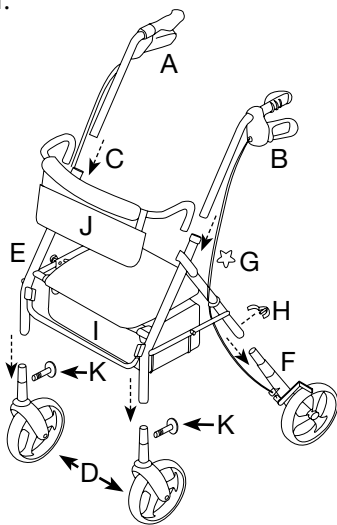


2. Expand the rollator frame by pulling outwards on the frame lock. Push the BIOS Safety Lock down and into place to lock the cross bars. To fold the rollator pull up on the BIOS Safety Lock to disengage. Place the rollator frame on a flat, hard surface. Remove plastic wrap on the wheels.

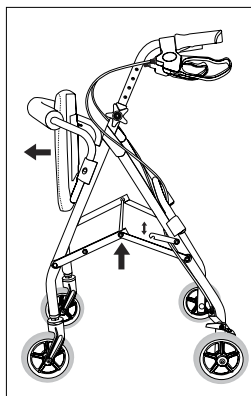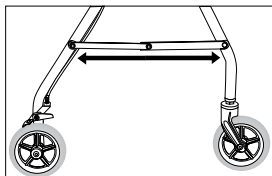


3. Insert handles (A and B) into the frame as illustrated. Insert the triangular fastening screw through the frame and handle holes, use the triangular fastening knobs (G) to adjust the handle height that best suits you; ideally the handles should be positioned at wrist height. Secure the handles in place by turning the knobs clockwise until tightened (do not over tighten).

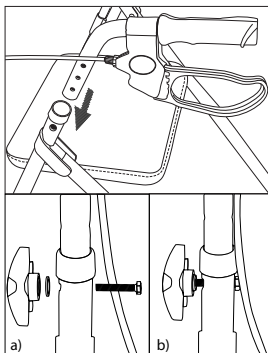

4. Attach the rear wheels (F) into the frame, ensure that the metal beads are aligned correctly with the holes. Clip safety buckles (H) onto rear legs. Attach the front wheels (D) in the same manner. (K) Twist stability knobs into holes located at the rear of the front legs.

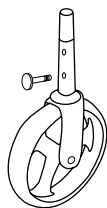


5. Insert the curved backrest (C) into its slot on the front side of the rollator frame as illustrated.

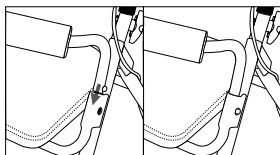

6. Attach the nylon rollator bag to the backrest (optional).


Brake Operation

To test the brakes, hold both brakes and gently squeeze the brake handle. The brakes should activate when this is done. If adjustments are required, turn the screw and nuts located at the end of the brake cable to increase (counter clockwise) or decrease (clockwise) the brake tension.

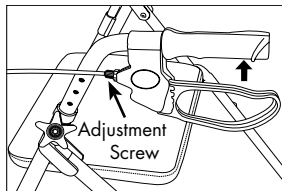


Folding the Rollator

Lift the seat, and pull up on the metal bar which is attached to the cross folding bar and pull upwards on the safety lock to release. The nylon storage bag will fold up into the rollator.

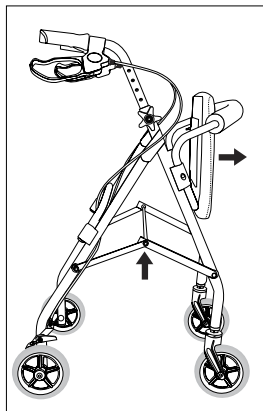

Parking Brakes

1. Push both handles down until they click to activate parking brake. The handle will lock automatically and stay in place.
2. To release the parking brake, pull the handle up. The handle will return to its basic position.

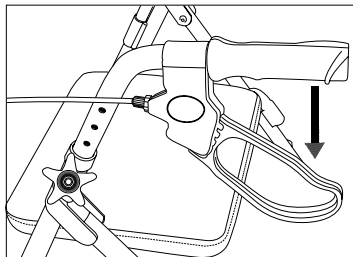

Parking Brake

Care & Maintenance

1. Ensure that ALL attached hardware is secured at all times.
2. Make sure seat is secured to rollator properly, tighten screw if loose.
3. Replace any broken, damaged or worn items immediately.

Recommended Handle/Seat Height Adjustment

Handle Height	Approx. User Height Min/Max
79.5 - 95 cm (31.3" - 37.4")	162 - 176 cm (5'-4" - 5'-10")
Seat Height	
49 - 53 cm (19.29" - 20.86")	

One Year Warranty

If this product proves to be defective in material or workmanship within one year of purchase, please return it to the address below. It will be repaired or replaced without charge upon receipt of the unit prepaid with \$20.00 to cover handling, packaging and return postage. Please include proof of purchase, your full name, address, daytime phone number or email address.

Toll Free: 800-387-8520



16975 Leslie Street,
Newmarket, ON L3Y 9A1
www.biosliving.com
TH2999_050912

BIOS living

AMBULATEUR
56045



Manuel
d'instructions

BIOS living

L'ambulateur Bios Living comprend un panier et un sac de rangement en nylon, des freins de verrouillage et un siège rembourré avec appui dorsal. Il se plie facilement si vous devez le ranger et il est transportable; il est doté de verrous de sécurité antipliage afin d'éviter que l'ambulateur se plie accidentellement lorsqu'il est utilisé.

Veuillez lire ce manuel d'instructions avant d'assembler ou d'utiliser cet ambulateur. Veuillez ranger ce manuel dans un endroit sûr.

NE PAS assembler ou utiliser cet équipement sans avoir préalablement lu et compris ce manuel d'instructions.

Pour votre sécurité personnelle

- L'ambulateur peut servir d'appui à un individu pesant jusqu'à 136 kg (300 lb), incluant le poids des contenus du panier et du sac de rangement en nylon.
- La charge admissible maximale pour le panier en nylon sous le siège est de 10 kg (22 lb).
- Ne vous tenez jamais debout sur l'ambulateur ni l'utiliser comme un tabouret.
- Ne déplacez jamais une personne assise sur le siège de l'ambulateur.
- Agissez avec prudence lorsque vous soulevez et transportez l'ambulateur.
- Vérifiez les freins avant de l'utiliser. L'entretien devrait garantir que TOUS les réglages manuels et de hauteur sont sécuritaires et que les pièces mobiles sont en bon état de fonctionnement avant d'utiliser cet ambulateur ou tout autre aide de locomotion.


- Assurez-vous que les freins sont en position de verrouillage avant de vous asseoir.
- Ne vous asseyez jamais sur l'ambulateur lorsqu'il est sur une surface inclinée.
- Veuillez toujours vous asseoir au centre du siège.
- Ne vous asseyez jamais sur l'ambulateur lorsqu'il est plié.
- Chaque individu devrait toujours consulter son médecin ou son thérapeute afin de déterminer le réglage adéquat lors de l'utilisation de l'ambulateur.
- Évitez une charge excessive dans le sac de l'ambulateur, l'ambulateur pourrait basculer.
- La charge admissible pour le sac en nylon de l'ambulateur est de 0,91 kg (2 lb).
- Les clients devraient chercher l'avis/les recommandations d'un professionnel de la santé pour déterminer si l'ambulateur est bien approprié pour leurs besoins.

Instructions d'assemblage



Veuillez examiner l'ambulateur s'il a été endommagé pendant l'expédition. N'utilisez pas l'ambulateur si vous voyez des bris apparents. Veuillez contacter votre détaillant pour vous renseigner sur les consignes de réparation ou de retour de l'appareil.

1. Avant de procéder à l'assemblage, veuillez lire parfaitement toutes les instructions et assurez-vous que les pièces décrites ci-dessous sont comprises.


- A. Poignée droite
- B. Poignée gauche
- C. Appui dorsal
- D. Roues avant (2)
- E. Armature de l'ambulateur
- F. Roues arrière (2)
- G. Boutons d'assemblage (2)
- H. Boucles de sécurité (2)
- I. Panier en nylon
- J. Sac de rangement
- K. Boutons de stabilité (2)

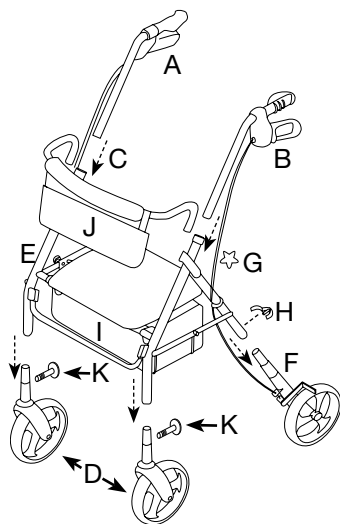


2. Dépliez l'armature de l'ambulateur en tirant le verrou de l'armature vers l'extérieur. Abaissez le verrou de sécurité BIOS et maintenez-le en place pour verrouiller les barres stabilisatrices. Pour plier l'ambulateur, remontez le verrou de sécurité BIOS pour le désengager. Placez l'armature de l'ambulateur sur une surface solide et plane. Retirez la pellicule plastique sur les roues.

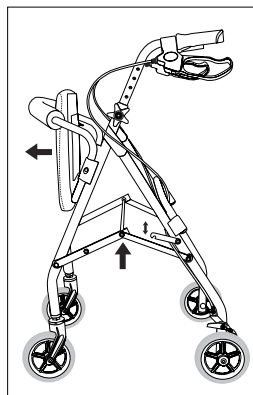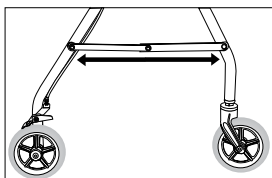


3. Insérez les poignées (A et B) dans l'armature comme le montre le schéma. Insérez la vis d'assemblage triangulaire à travers les trous de l'armature et de la poignée; utilisez le bouton d'assemblage triangulaire (G) pour régler la poignée à la hauteur qui vous conviendra le mieux; idéalement, les poignées devraient se situer à la hauteur des poignets. Fixez les poignées en place en tournant les boutons dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elles soient serrées (ne serrez pas trop).

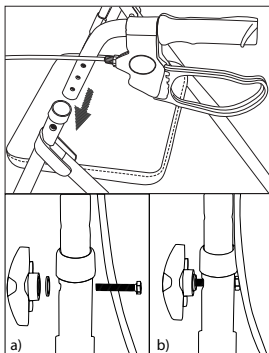

4. Fixez les roues arrière (F) dans l'armature en vous assurant que les billes métalliques sont alignées correctement avec les trous. Fixez les boucles de sécurité (H) sur les pattes arrière. Fixez les roues avant (D) en suivant la même procédure. Vissez les boutons de stabilité (K) dans les trous situés derrière les pattes de devant.

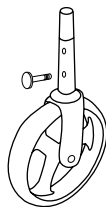


5. Insérez l'appui dorsal moulant (C) dans la rainure située sur le côté droit de l'armature de l'ambulateur comme le montre le schéma.

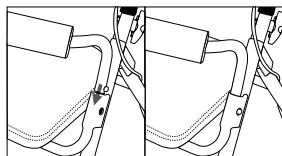

6. Fixez le sac en nylon sur l'appui dorsal de l'ambulateur (facultatif).


Fonctionnement des freins

Pour mettre à l'essai les freins, tenez les deux freins et pressez doucement les poignées des freins. Les freins devraient se déclencher. Si des réglages sont requis, tournez la vis et l'écrou situés à l'extrémité du câble du frein pour augmenter la tension du frein (dans le sens inverse des aiguilles d'une montre) ou réduire la tension du frein (dans le sens des aiguilles d'une montre).

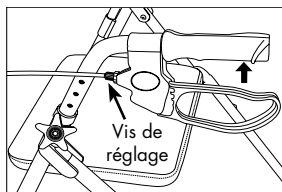


Pliage de l'ambulateur

Soulevez le siège et remontez la barre métallique qui est fixée à la barre de pliage stabilisatrice et soulevez le verrou de sécurité pour le libérer. Le panier en nylon de rangement se pliera dans l'ambulateur.

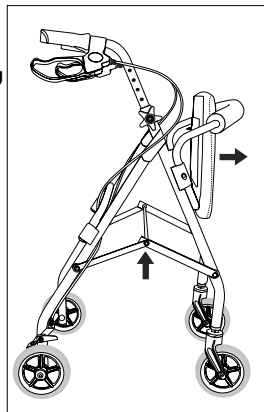

Freinage d'immobilisation

1. Abaissez les deux poignées jusqu'à ce qu'elles produisent un bruit sec pour enclencher le freinage d'immobilisation. La poignée se verrouillera automatiquement et restera en place.

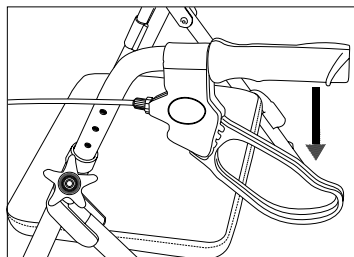

Freinage d'immobilisation

2. Pour déclencher le freinage d'immobilisation, remontez la poignée. La poignée retournera à sa position initiale.

Soin et entretien

1. Assurez-vous que TOUTE la quincaillerie de fixation est fixée solidement en tout temps.
2. Assurez-vous que le siège est bien fixé à l'ambulateur; serrez la vis si celle-ci est desserrée.
3. Remplacez immédiatement toutes pièces brisées, endommagées ou usées.

Réglage recommandé pour la hauteur des poignées / du siège

Hauteur des poignées	Taille approximative min/max de l'utilisateur
79,5 à 95 cm (31,3 po à 37,4 po)	162 à 176 cm (5 pi 4 po à 5 pi 10 po)
Hauteur du siège	
49 à 53 cm (19,29 po à 20,86 po)	

Garantie d'un an

Si ce produit se révèle défectueux en raison de vices de matériaux ou de fabrication pour une période d'un an à compter de la date d'achat, veuillez le renvoyer à l'adresse spécifiée ci-dessous. Le produit sera réparé ou remplacé, sans frais, après réception du produit port payé et d'un montant de 20,00 \$ pour couvrir les frais de manutention, emballage et port de retour. Veuillez inclure une preuve d'achat, vos nom et prénom, adresse, numéro de téléphone de jour ou votre adresse électronique.

Sans frais d'interurbain 800-387-8520

 **Thermor**
16975 Leslie Street,
Newmarket, ON L3Y 9A1
www.biosliving.com
TH2999_051012